




RESODURA[®] *matrix onlay*


Kollagenmembran zum Dura Ersatz

RESODURA[®]*matrix onlay* ist eine anpassungsfähige und resorbierbare Membranmatrix, welche aus hochreinem Typ-1-Kollagen entwickelt wurde. Sie ist für den nahtlosen Einsatz als Onlay-Kollagenmembran zur Reparatur der Dura mater indiziert. Es empfiehlt sich, RESODURA[®]*matrix onlay* vor der Implantation für ca. 30 Sekunden in steriler, isotonischer Kochsalzlösung zu hydrieren. Sowohl im trockenen, als auch im feuchten Zustand kann sie auf die Größe des Defektes zugeschnitten werden. Sie ähnelt in ihrer Struktur und Eigenschaft der menschlichen Dura mater und besitzt eine exzellente Anpassungsfähigkeit an die anatomischen Gegebenheiten. Es ist keine Fixierung mit Nähten erforderlich, in speziellen Situationen können dennoch spannungsfreie, atraumatische Nähte gelegt werden. Dank ihrer ausgeglichenen in-vivo Resorptionseigenschaften, fördert RESODURA[®]*matrix onlay* die Regeneration des körpereigenen Gewebes. RESODURA[®]*matrix onlay* ist doppelt steril verpackt und kann bei Zimmertemperatur gelagert werden.

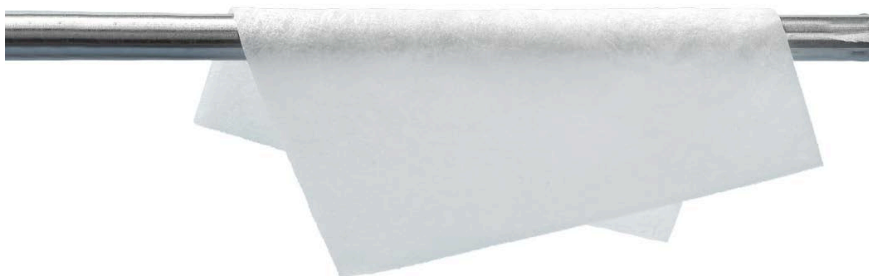

- Hochreines Typ-1-Kollagen bovinen Ursprungs
- Adaptiv und flexibel
- Nahtlose Implantation möglich
- Flüssigkeitsdicht
- Vollständig resorbierbar
- Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften

Kollagenmembran zum Dura Ersatz

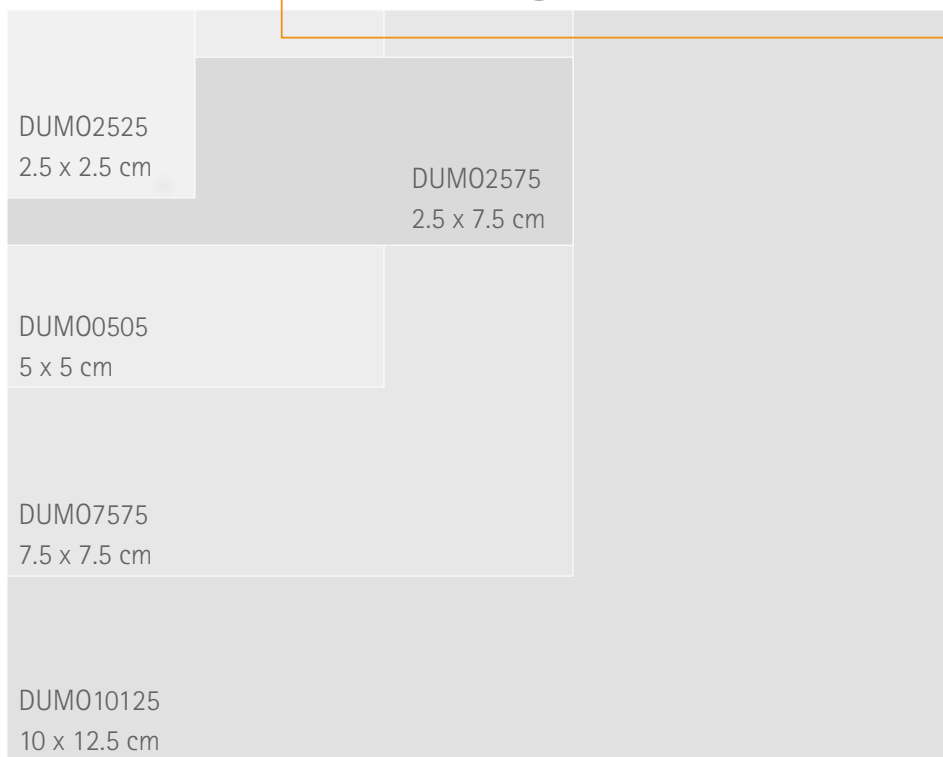

REF	GRÖÖE	INHALT
DUM02525	2.5 x 2.5 cm	1 Membran
DUM02575	2.5 x 7.5 cm	1 Membran
DUM00505	5 x 5 cm	1 Membran
DUM07575	7.5 x 7.5 cm	1 Membran
DUM010125	10 x 12.5 cm	1 Membran



Collagen Matrix, Inc.

15 Thornton Road, Oakland, NJ 07436, USA

Tel: 201.405.1477, **Toll Free:** 888.405.1001

Fax: 201.405.1355

www.collagenmatrix.com