

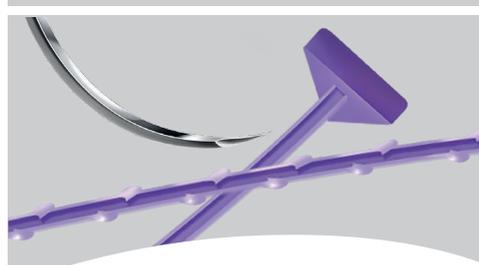
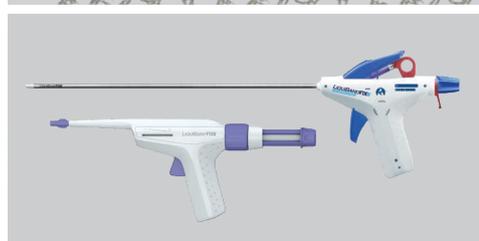


# Moderne Lösungen für die Hernienchirurgie

## Mit System zum Ziel

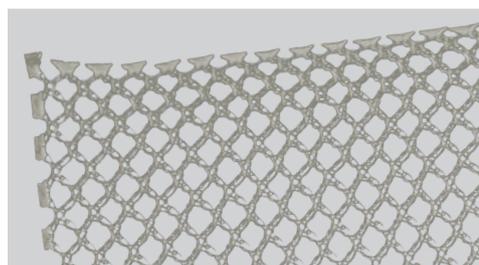

RESORBA® PP Mesh  
LIQUIBANDFIX8®  
RESORBA® Barbed Suture

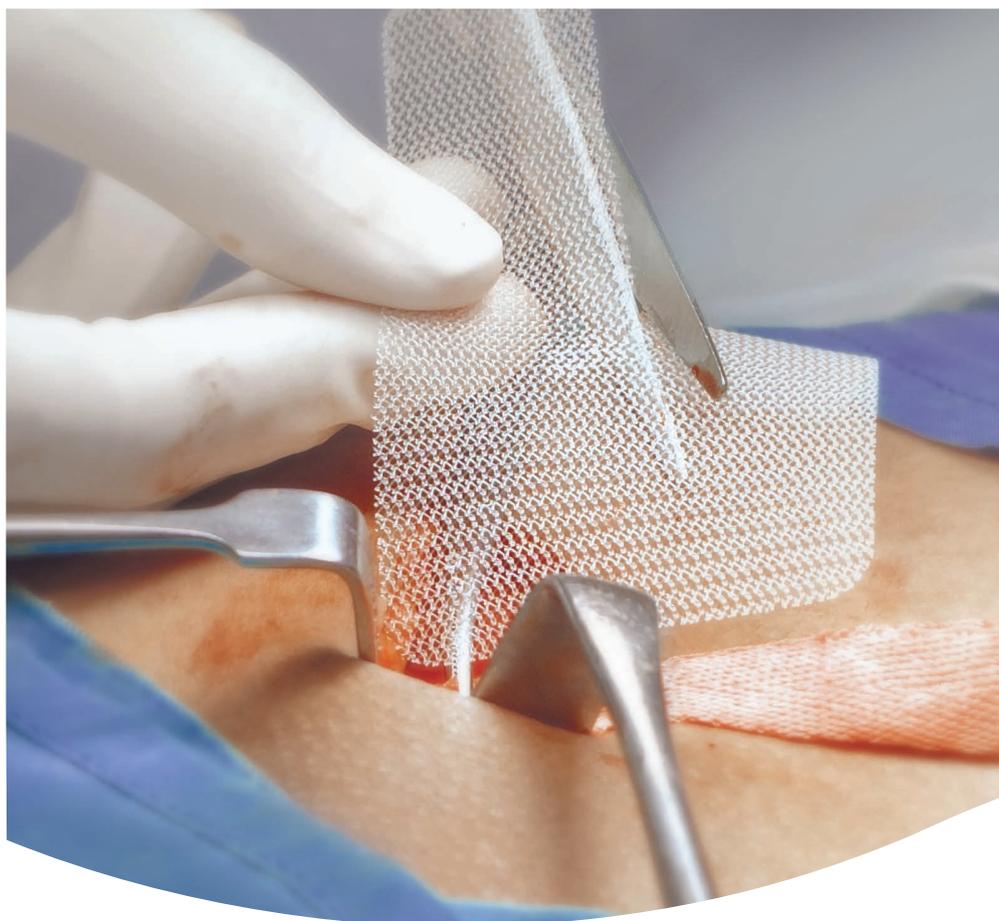

# Unsere Produkte für die Hernienchirurgie

## RESORBA® PP Mesh

Ein nicht-resorbierbares Netz aus Polypropylen, das für die chirurgische Hernienreparatur eingesetzt wird.


Besonders hervorzuheben ist die großporige und leichtgewichtige Konstruktion.



## LIQUIBANDFIX8®

Speziell für die atraumatische Fixierung von Herniennetzen entwickelte Systeme.

Innovative, flüssige Ankerpunkte werden appliziert, die für eine sichere Fixierung sorgen und die Risiken von häufig auftretenden postoperativen Komplikationen reduzieren.

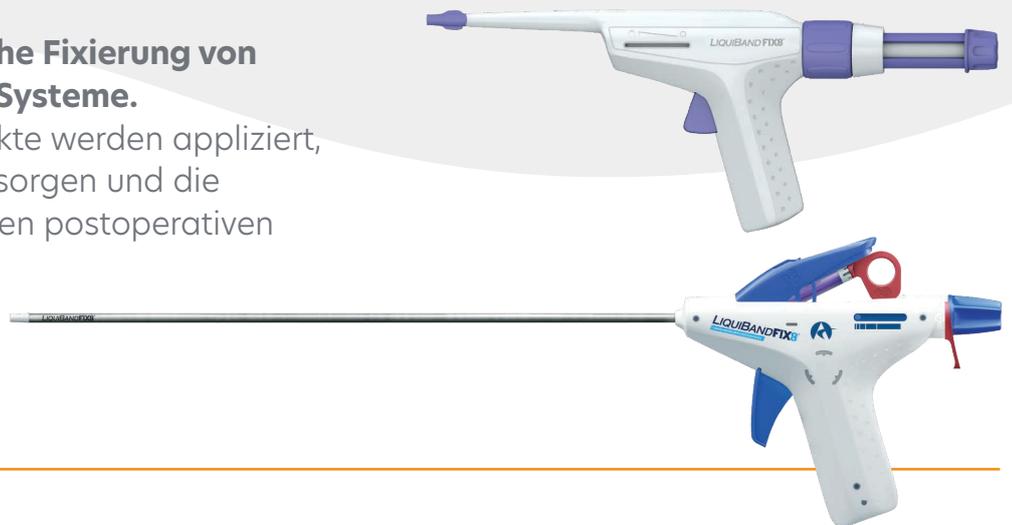

## RESORBA® Barbed Suture

Ein selbstsicherndes Wundverschluss-System bestehend aus chirurgischem Nahtmaterial aus Polydioxanon mit Widerhaken.

Die Widerhaken sind unidirektional angeordnet und ermöglichen die Gewebeapproximation, ohne dass chirurgische Knoten erforderlich sind.

RESORBA® Barbed Suture kann für den Peritonealverschluss eingesetzt werden.



# RESORBA® PP Mesh

## Einfach, funktional und bewährt

### Eigenschaften

**Starkes, flexibles und elastisches Netz aus Polypropylen**

- Großporig für eine bessere Gewebeproliferation
- Ausgezeichnete Stabilität und Berstfestigkeit für eine dauerhafte Unterstützung
- Hervorragende Biokompatibilität für die Reduktion einer Gewebereaktion
- Ultraschall-geschnitten für eine präzise Form und um ein Ausfransen der Kanten zu verhindern

### Fakten

#### Material

Monofilas, ungefärbtes Polypropylen

#### Stärke

0,65 mm - 0,75 mm

#### Porengröße

2,00 mm - 3,50 mm

#### Gewicht

40,00 g/m<sup>2</sup> - 70,00 g/m<sup>2</sup>



### Verfügbare Größen

REF	Größe	Inhalt	REF	Größe	Inhalt
PPM611	6 x 11 cm	6 Netze	PPM49*	4 x 9 cm	6 Netze
PPM715	7,6 x 15 cm	6 Netze	PPM59*	5 x 9 cm	6 Netze
PPM1015	10 x 15 cm	3 Netze	PPM1215*	12,5 x 15 cm	3 Netze
PPM1530	15 x 30 cm	1 Netz	PPM1218*	12 x 18 cm	3 Netze
PPM2030	20 x 30 cm	1 Netz	PPM1515*	15 x 15 cm	3 Netze
PPM3030	30 x 30 cm	1 Netz	PPM1520*	15 x 20 cm	1 Netz



Produkt hergestellt durch:  
Healthium Medtech Limited  
#472-D, 13th Cross, 4th Phase  
Peenya Industrial Area, Bangalore,  
Karnataka-560058, India  
Email: care@healthiummedtech.com  
Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2021/000367

\* Auf Anfrage bestellbar. Bitte verlängerte Lieferzeit beachten.

# LIQUIBANDFIX8® – Intuition trifft Innovation


## Entwickelt für die atraumatische Herniennetzfixierung

Innovative, flüssig applizierte Anker sorgen für eine sichere Fixierung von Herniennetzen und reduzieren die Risiken häufiger post-operativer Komplikationen wie:

- Neuralgien<sup>1</sup>
- Parästhesien<sup>1</sup>
- Mechanische Gewebetraumata<sup>1</sup>

LIQUIBANDFIX8® wurde für eine präzise und kontrollierte Abgabe des flüssigen Klebstoffs für die Herniennetzfixierung entwickelt:

- Starke und sichere Netzfixierung
- Schnelle Aushärtezeit <10s
- Antihaft / atraumatische Applikatortspitze
- N-Butyl-Cyanoacrylat

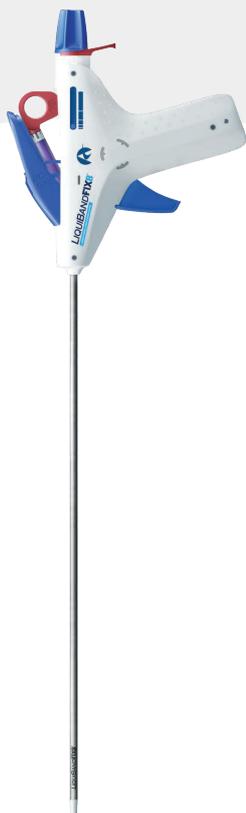

### **LIQUIBANDFIX8®** LAPARO HERNIA MESH FIXATION DEVICE

Fortschrittliches Design, das eine exakte Fixierung bietet und für Sicherheit und Komfort der Patienten gestaltet wurde

### **LIQUIBANDFIX8®** OPEN HERNIA MESH FIXATION DEVICE

Einzigartiges Design mit zwei Spitzen, das speziell für die atraumatische Netzfixierung und den topischen Wundverschluss entwickelt wurde

# LIQUIBANDFIX8® – Intuition trifft Innovation



schnell  
vorbereitet



stark und  
sicher



präzise  
appliziert



gefärbter  
Kleber



Abnehmbare  
Spitze



Atraumatische  
Spitze

## Starke Fixierung

LIQUIBANDFIX8® hat im Vergleich zu mechanischen Fixiervorrichtungen eine höhere Berstfestigkeit gezeigt:

456,8  
mm Hg

LIQUIBANDFIX8®

366,3  
mm Hg

SECURESTRAP™

273,8  
mm Hg

AbsorbaTack™

## Bestellinformation

REF	Beschreibung	Inhalt
FX001	LIQUIBANDFIX8® – Laparoskopisches Fixierungsgerät für Herniennetze	1 Instrument / VE
FX002	LIQUIBANDFIX8® – OPEN für die offene Herniennetzfixierung	1 Instrument / VE



Produkt hergestellt durch:  
Advanced Medical Solutions Ltd  
Western Wood Way,  
Langage Science Park  
Plymouth, PL7 5BG, Devon, UK  
Tel: +44(0) 1752 209 955  
Fax: +44(0) 1752 209 956  
Email: info@liquiband.com

# RESORBA® Barbed Suture

## Selbstsichernder Wundverschluss

### Eigenschaften

#### Langfristig resorbierbares Polydioxanon

- Selbstsicherndes Wundverschluss-System mit Widerhaken für die Gewebeapproximation ohne chirurgische Knoten
- Einseitiger Winkelschnitt in Form einer unidirektionalen Spirale
- Sehr hohe Reißkraft
- Silikonisierte Nadeln aus rostfreiem Stahl der 300er Serie
- Dreieckiger Endstopper für die gleichmäßige Kraftverteilung auf dem Gewebe



#### Nadel

300er Stahl für hohe Biegesteifigkeit und Oberflächensilikonisierung für verbesserte Gleitfähigkeit durch das Gewebe.



#### Barbed Suture

Die unidirektional verlaufenden Widerhaken sind in ihrer Anzahl der jeweiligen Fadenstärke angepasst. Der dadurch optimierte Abstand zwischen den einzelnen Widerhaken und deren spezielle Form gewährleisten eine sichere und feste Fixierung über alle Fadenstärken hinweg.



#### Dreieckiger Endstopper

Dadurch entfällt das „Loopen“ zu Beginn des Nähens. Die Handhabung wird schneller und einfacher. Der Endstopper steht senkrecht zum Gewebe und verhindert dadurch das Auslaufen der Naht und fixiert somit das Nahtmaterial an der gewünschten Stelle.



### Empfohlene Kombinationen für den Peritonealverschluss



REF	Beschreibung	Inhalt
	RESORBA® Barbed Suture	
BSUPN0208	violett, 2-0 USP, HR 27, 15 cm	12
BSUPN0203	violett, 3-0 USP, HR 22, 15 cm	12
BSUPN0202	violett, 3-0 USP, HR 17, 15 cm	12

Für das komplette RESORBA® Barbed Suture Portfolio, bitte den QR-Code scannen. Sie werden direkt zur Produktbroschüre verlinkt.



Produkt hergestellt durch:  
Healthium Medtech Limited  
#472-D, 13th Cross, 4th Phase  
Peenya Industrial Area, Bangalore,  
Karnataka-560058, India  
Email: care@healthiummedtech.com  
Mfg. Lic. No.: MFG/MD/2021/000367

