


# RESORBA® EasyFlex

RESORBABLE COLLAGEN MEMBRANE



## Flexible Kollagenmembran mit kontrollierter Resorptionsdauer

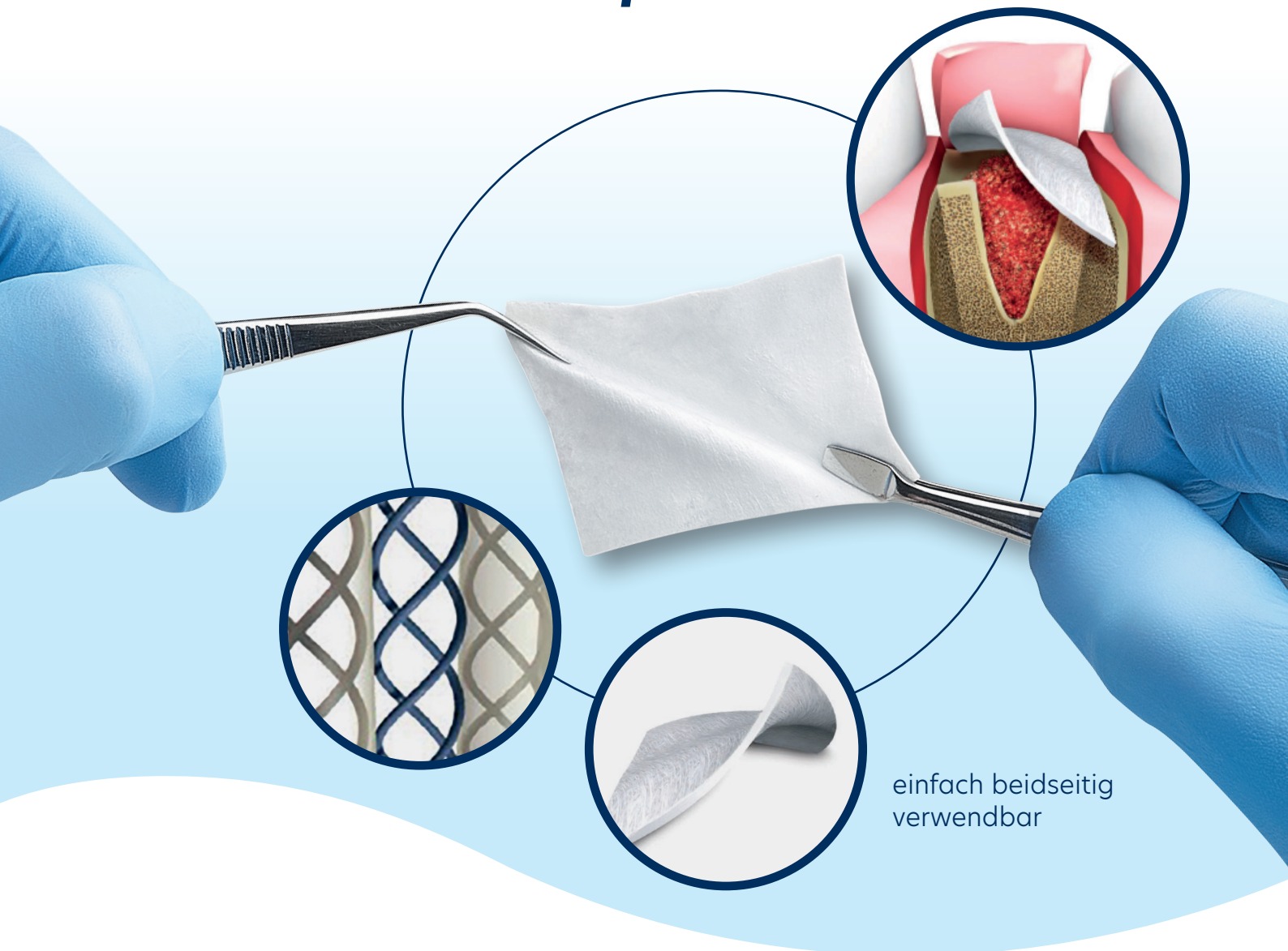

einfach beidseitig  
verwendbar

**Adaptierbar** - trocken oder nass

**Quervernetzt** - für die gewünschte Barrierefunktion

**Stark** - einfach zu vernähen

**Zuschneidbar** - mit einer Schere Größe oder Form anpassen

 **RESORBA**<sup>®</sup>  
REPAIR & REGENERATE



Advanced Medical Solutions

# RESORBA® EasyFlex

RESORBABLE COLLAGEN MEMBRANE



RESORBA® EasyFlex ist eine resorbierbare Membran aus Kollagen der Schweinedermis für die gesteuerte Knochen- und Geweberegeneration (GBR und GTR).

Dank seiner lang bewährten Biokompatibilität und niedrigen Immunogenität wird porcines Gewebe bereits seit vielen Jahren in verschiedenen Verfahren der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie eingesetzt.

RESORBA® EasyFlex ist eine quervernetzte Kollagenmembran, die eine vorhersagbare Resorptionsdauer und Flexibilität vereint. Sie hält die gewünschte Barrierefunktion 12 Wochen lang aufrecht.




## Indikationen

RESORBA® EasyFlex ist eine resorbierbare Membran. Sie ist indiziert für parodontal-/dentalchirurgische Eingriffe zur Platzierung in Bereichen von Parodontaldefekten, Dentalimplantaten, Knochendefekten oder Knochenkammerkonstruktionen und unterstützt die Wundheilung nach dem Eingriff.


RESORBA® EasyFlex schafft 12 Wochen lang eine sichere Barriere an der Defektstelle gegen die Kolonisierung des darunterliegenden Knochens durch Weichgewebszellen (Bindegewebs- und Epithelzellen) und ermöglicht gleichzeitig die Diffusion biologischer Flüssigkeiten. Da die Membran natürlich resorbiert wird, ist kein zweiter chirurgischer Eingriff zur Entfernung erforderlich. Die Gesamtresorptionsdauer beträgt 24 Wochen.

RESORBA® EasyFlex wird für die Verwendung mit Knochenersatzmaterial zur Förderung von neuem Knochenwachstum empfohlen.

## Verfügbare Größen

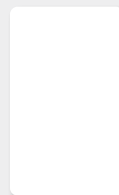

15 x 25 mm

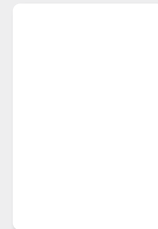

20 x 30 mm



30 x 40 mm

## Bestellinformationen

REF	Größe	Inhalt
SB0701EZC1525	15 x 25 mm	1 Membran
SB0901EZC1525	15 x 25 mm	2 Membranen
SB0702EZC2030	20 x 30 mm	1 Membran
SB0703EZC3040	30 x 40 mm	1 Membran



Hersteller:  
Biomatlante SA, ZA Les Quatre Nations, 5 rue Edouard Belin,  
44360 Vigneux de Bretagne, France

RESORBA Medical GmbH, Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany  
Tel. +49 9128 / 91 15 0, Fax +49 9128 / 91 15 91, infomail@resorba.com, www.resorba.com