

# SUPOLENE

NICHT-RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

**RESORBA**  
SUTURES & SUPPLIES

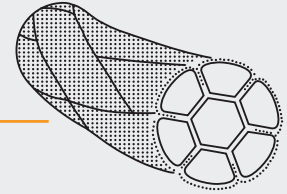


- ✓ nicht-resorbierbarer Polyesterfaden
- ✓ extrem zugfest
- ✓ hydrophob
- ✓ alterungsbeständig
- ✓ sehr gewebefreundlich

- ✓ *non-absorbable suture*
- ✓ *high and permanent tensile strength*
- ✓ *hydrophobic*
- ✓ *non-ageing*
- ✓ *completely non-irritating*

# SUPOLENE

NICHT-RESORBIERBARES NAHTMATERIAL



▶ SUPOLENE wird, ebenso wie POLYESTER, durch Polykondensation von Ethylenglykol und Terephthalsäure hergestellt. Die Faserbildung erfolgt nach dem Trockenspinnverfahren. Anschließend wird der Faden präzisionsgeflochten, gefärbt, getempert und die Oberfläche durch Beschichtung des Fadens speziell veredelt. Durch diese Oberflächenbehandlung werden Kapillarität sowie Sägewirkung beim Gewebedurchzug und Knotenlauf auf ein Minimum reduziert.

SUPOLENE ist hydrophob, also ohne Wasserabsorptionseigenschaften. Das Material ist mit einem physiologisch unbedenklichen Farbstoff eingefärbt.

- ▶ **Farbe:** grün, weiß (ohne Farbstoff)
- ▶ **Chemische Bezeichnung:** Polyethylenterephthalat Polyesterfaser
- ▶ **Fadenstärke:** USP 6-0 – 3 (0.7-6 metric)
- ▶ **Konfektionsangebote:**
  - Nadel-Faden-Kombinationen
  - in vorgeschrittenen Längen
- ▶ **Sterilisation:** Ethylenoxid

## Eigenschaften

- ✓ hohe Reißfestigkeit
- ✓ hervorragende Fadengleitfähigkeit, keine Sägewirkung
- ✓ sehr gleichmäßige und glatte Oberflächenbeschaffenheit
- ✓ sehr geringe Gewebereaktion
- ✓ geringe Kapillarität

▶ Like POLYESTER, the production of SUPOLENE involves the polycondensation of ethylene glycol and terephthalic acid. Fibres are formed using the dry spinning process. The suture then undergoes precision-braiding, dyeing and tempering and the surface is specially refined by coating. This surface treatment minimises capillarity and any sawing effect during tissue passage and knot rundown. SUPOLENE is hydrophobic, i.e., it does not absorb water.

The material is coloured with a physiologically harmless dye.

- ▶ **Colour:** green, white (no dye)
- ▶ **Chemical name:** polyethylene terephthalate polyester fibre
- ▶ **Thread diameter:** USP 6-0 – 3 (0.7-6 metric)
- ▶ **Types of packaging:**
  - needle-thread-combinations
  - in precut lengths
- ▶ **Sterilization method:** ethylene oxide





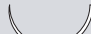

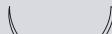





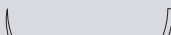
## Properties

- ✓ high tear resistance
- ✓ excellent tissue passage, no sawing effect
- ✓ very even and smooth surface properties
- ✓ very minimal tissue reaction
- ✓ minimal capillarity

# SUPOLENE

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile



| Nadel / needle   | Stärke / gauge |        | Länge / length<br>(m) | Farbe<br>colour | Best.-Nr.<br>code no. | Packungsinhalt<br>box content<br>(Stück / pieces) |
|--|----------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|  | USP            | metric |                       |                 |                       |   |
| <b>HR, HRX = 1/2-Kreis Rundkörper</b><br><b>HR, HRX = 1/2 circle, taper point</b>  |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>HR 12</b><br>●   | 5-0            | 1      | 0,75                  | grün / green    | 9021                  | 36  |
|  | 4-0            | 1.5    | 0,75                  | grün / green    | 9022                  | 36  |
| <b>HR 12 A</b><br>● Abziehnadel / control release needle    | 4-0            | 1.5    | 8 x 0,45              | grün / green    | A90232 (M)            | 12  |
| <b>2 x HR 15</b><br>●                                       | 5-0            | 1      | 0,75                  | grün / green    | 9024                  | 36  |
| <b>HR 17</b><br>●   | 5-0            | 1      | 0,75                  | grün / green    | 9025                  | 36  |
|  | 4-0            | 1.5    | 0,75                  | grün / green    | 9026                  | 36  |
|  | 3-0            | 2      | 0,75                  | grün / green    | 9027                  | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 9028*                 | 36  |
| <b>HR 17 A</b><br>● Abziehnadel / control release needle    | 4-0            | 1.5    | 8 x 0,45              | grün / green    | A90238 (M)            | 12  |
| <b>2 x HR 17</b><br>●                                     | 4-0            | 1.5    | 0,90                  | grün / green    | 90210                 | 36  |
|  | 3-0            | 2      | 0,90                  | grün / green    | 90214                 | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 0,90                  | grün / green    | 90234                 | 36  |
| <b>HR 22</b><br>●   | 4-0            | 1.5    | 0,75                  | grün / green    | 90215                 | 36  |
|  | 3-0            | 2      | 0,75                  | grün / green    | 90216                 | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 90217                 | 36  |
| <b>HR 22 A</b><br>● Abziehnadel / control release needle  | 4-0            | 1.5    | 4 x 0,45              | grün / green    | A90233 (M)            | 12  |
| <b>2 x HRX 22</b><br>●                                    | 2              | 5      | 0,75                  | grün / green    | 9043                  | 24  |
| <b>HR 27</b><br>●   | 4-0            | 1.5    | 0,75                  | grün / green    | 90233                 | 36  |
|  | 3-0            | 2      | 0,75                  | grün / green    | 90218                 | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 90219                 | 36  |
|  | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 90220                 | 36  |
|  | 1              | 4      | 0,75                  | grün / green    | 90221                 | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 1,20                  | grün / green    | 90222                 | 36  |
|  | 0              | 3.5    | 1,20                  | grün / green    | 90223                 | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 6 x 0,75              | grün / green    | M90222 (M)            | 12  |
| <b>2 x HRX 27</b><br>●                                    | 2              | 5      | 0,75                  | grün / green    | 9041                  | 24  |
|  | 3              | 6      | 0,75                  | grün / green    | 9042                  | 24  |
| <b>HR 30</b><br>●   | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 90227                 | 36  |
|  | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 90228                 | 36  |
| <b>HR 35</b><br>●   | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 90230                 | 36  |
|  | 1              | 4      | 0,75                  | grün / green    | 90231                 | 36  |







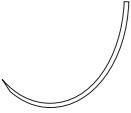

\*eventuell mit verlängerter Lieferzeit verbunden / possibly associated with an extended delivery time

(M) = Multipack

# SUPOLENE

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile


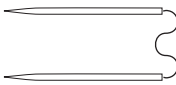
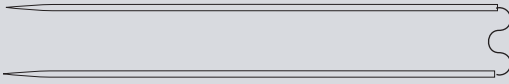









| Nadel / needle   | Stärke / gauge |        | Länge / length<br>(m) | Farbe<br>colour | Best.-Nr.<br>code no. | Packungsinhalt<br>box content<br>(Stück / pieces) |
|--|----------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|  | USP            | metric |                       |                 |                       |   |
| <b>HRT = 1/2-Kreis schneidende Rundkörper</b><br><i>HRT = 1/2 circle, taper cutting</i>                  |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>HRT 18</b><br>▼      | 5-0            | 1      | 0,45                  | grün / green    | 90630                 | 36  |
|  | 4-0            | 1.5    | 0,45                  | grün / green    | 90612                 | 36  |
|  | 5-0            | 1      | 0,75                  | grün / green    | 9061                  | 36  |
|  | 4-0            | 1.5    | 0,75                  | grün / green    | 9062                  | 36  |
|  | 3-0            | 2      | 0,75                  | grün / green    | 9063                  | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 9064                  | 36  |
|  | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 90652                 | 36  |
| <b>2 x HRT 18</b><br>▼  | 4-0            | 1.5    | 0,75                  | grün / green    | 9067                  | 36  |
|  | 3-0            | 2      | 0,75                  | grün / green    | 9068                  | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 9069                  | 36  |
|  | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 90610                 | 36  |
| <b>HRT 25</b><br>▼     | 3-0            | 2      | 0,75                  | grün / green    | 90616                 | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 90617                 | 36  |
|  | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 90618                 | 36  |
| <b>HRT 35</b><br>▼    | 2              | 5      | 0,75                  | grün / green    | 90655                 | 24  |
| <b>HRT 45</b><br>▼    | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 90620                 | 24  |
|  | 2              | 5      | 0,75                  | grün / green    | 90626                 | 24  |
|  | 2              | 5      | 4 x 0,75              | grün / green    | M90613 (M)            | 12  |
| <b>ART = Asymptotische schneidende Rundkörper</b><br><i>ART = asymptotic, taper cutting</i>              |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>ART 13</b><br>▼    | 5-0            | 1      | 0,45                  | grün / green    | 9284                  | 12  |
|  | 4-0            | 1.5    | 0,45                  | grün / green    | 9281                  | 12  |
| <b>ART 25</b><br>▼    | 4-0            | 1.5    | 0,45                  | grün / green    | 9282                  | 12  |
|  | 3-0            | 2      | 0,45                  | grün / green    | 9283                  | 12  |
| <b>DR = 3/8-Kreis Rundkörper</b><br><i>DR = 3/8 circle, taper point</i>                                  |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>DR 20</b><br>●     | 3-0            | 2      | 0,75                  | grün / green    | 90718                 | 36  |

# SUPOLENE

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile




| Nadel / needle   | Stärke / gauge |        | Länge / length<br>(m) | Farbe<br>colour | Best.-Nr.<br>code no. | Packungsinhalt<br>box content<br>(Stück / pieces) |
|--|----------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|  | USP            | metric |                       |                 |                       |   |
| <b>GR = Gerade Rundkörper</b><br><b>GR = straight, taper point</b>   |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>GR 20</b><br>●                 | 4-0            | 1.5    | 0,45                  | grün / green    | 9096                  | 36  |
|  | 3-0            | 2      | 0,45                  | grün / green    | 9091                  | 36  |
| <b>2 x GR 20</b><br>●             | 4-0            | 1.5    | 0,35                  | grün / green    | 9093                  | 36  |
| <b>2 x GR 65</b><br>●             | 3              | 6      | 0,75                  | grün / green    | 9094                  | 24  |
| <b>DRT = 3/8-Kreis schneidende Rundkörper</b><br><b>(Diamond-Spitze)</b><br><b>DRT = 3/8 circle, taper cutting</b> |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>DRT 12</b><br>▼              | 5-0            | 1      | 0,75                  | grün / green    | 9082                  | 36  |
| <b>DRT 18</b><br>▼              | 3-0            | 2      | 0,75                  | grün / green    | 9087                  | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 9088                  | 36  |
| <b>HS = 1/2-Kreis außen schneidend</b><br><b>HS = 1/2 circle, reverse cutting</b>                                  |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>HS 18</b><br>▼               | 4-0            | 1.5    | 0,45                  | grün / green    | 9118                  | 36  |
|  | 3-0            | 2      | 0,45                  | grün / green    | 9111                  | 36  |
| <b>HS 22</b><br>▼               | 3-0            | 2      | 0,75                  | grün / green    | 9112                  | 36  |
|  | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 9113                  | 36  |
| <b>HS 27</b><br>▼               | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 9115                  | 36  |
| <b>HS 35</b><br>▼               | 1              | 4      | 0,75                  | grün / green    | 9116                  | 36  |
| <b>HS 40</b><br>▼               | 1              | 4      | 0,75                  | grün / green    | 9117                  | 36  |

# SUPOLENE

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile











| Nadel / needle  | Stärke / gauge  |        | Länge / length<br>(m) | Farbe<br>colour | Best.-Nr.<br>code no. | Packungsinhalt<br>box content<br>(Stück / pieces) |
|---|---|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|   | USP   | metric |                       |                 |                       |   |
| <b>DS = 3/8-Kreis außen schneidend,</b><br><b>DSM = mit PREMIUM-Schliff</b><br><b>DS = 3/8 circle, reverse cutting, DSM = PREMIUM cut</b> |   |        |                       |                 |                       |   |
| <b>DS 13</b><br>▼   |    | 4-0    | 1.5                   | 0,45            | grün / green          | 9142 36   |
| <b>DSM 13</b><br>▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut  |    | 5-0    | 1                     | 0,45            | grün / green          | 9152 36   |
| <b>DSM 16</b><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut  |    | 4-0    | 1.5                   | 0,45            | grün / green          | 9153 36   |
| <b>DS 18</b><br>▼   |    | 5-0    | 1                     | 0,45            | grün / green          | 9155 36   |
| <b>DS 18 F</b>  |    | 4-0    | 1.5                   | 0,45            | grün / green          | 9156 36   |
| <b>DSM 18</b><br>▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut  |   | 5-0    | 1                     | 0,45            | grün / green          | 9144 36   |
|   |   | 4-0    | 1.5                   | 0,45            | grün / green          | 9145 36   |
|   |   | 3-0    | 2                     | 0,45            | grün / green          | 9146 36   |
|   |   | 4-0    | 1.5                   | 0,45            | grün / green          | 91427 36  |
| <b>DS 21</b>  |  | 4-0    | 1.5                   | 0,45            | grün / green          | 9157 36   |
|   |   | 3-0    | 2                     | 0,45            | grün / green          | 9158 36   |
|   |   | 2-0    | 3                     | 0,45            | grün / green          | 9159 36   |
| <b>DSM 21</b><br>▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut  |  | 4-0    | 1.5                   | 0,45            | grün / green          | 91526 36  |
|   |   | 3-0    | 2                     | 0,45            | grün / green          | 91423 36  |
|   |   | 2-0    | 3                     | 0,45            | grün / green          | 91424 36  |
| <b>DS 24</b>  |  | 4-0    | 1.5                   | 0,45            | grün / green          | 91425 36  |
|   |   | 3-0    | 2                     | 0,45            | grün / green          | 91516 36  |
|   |   | 2-0    | 3                     | 0,45            | grün / green          | 91517 36  |
|   |   | 3-0    | 2                     | 0,75            | grün / green          | 91518 36  |
|   |   | 0      | 3.5                   | 0,75            | grün / green          | 9147 36   |
|   |   | 3-0    | 2                     | 0,75            | grün / green          | 9148 36   |
| <b>DSM 24</b><br>▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut  |  | 2-0    | 3                     | 0,45            | grün / green          | 9149 36   |
|   |   | 2-0    | 3                     | 0,75            | grün / green          | 91410 36  |
|   |   |        |                       |                 | grün / green          | 91433 36  |
| <b>DS 27</b>  |  | 3-0    | 2                     | 0,75            | grün / green          | 91513 36  |
|   |   | 2-0    | 3                     | 0,75            | grün / green          | 91514 36  |
| <b>DSM 27</b><br>▽ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut  |  | 2-0    | 3                     | 0,45            | grün / green          | 91411 36  |
|   |   | 2-0    | 3                     | 0,75            | grün / green          | 91426 36  |
|   |   | 2-0    | 3                     | 0,45            | grün / green          | 91520 36  |
|   |   | 2-0    | 3                     | 0,75            | grün / green          | 91519 36  |

# SUPOLENE

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile



| Nadel / needle  | Stärke / gauge |        | Länge / length<br>(m) | Farbe<br>colour | Best.-Nr.<br>code no. | Packungsinhalt<br>box content<br>(Stück / pieces) |
|---|----------------|--------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|   | USP            | metric |                       |                 |                       |   |
| <b>DS 30</b><br>   | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 91412                 | 36  |
|   | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 91413                 | 36  |
|   | 1              | 4      | 0,75                  | grün / green    | 91428                 | 36  |
| <b>DSM 30</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut         | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 91521                 | 36  |
|   | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 91522                 | 36  |
| <b>DS 40</b><br>   | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 91435                 | 36  |
|   | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 91414                 | 36  |
| <b>DS 50</b><br>   | 1              | 4      | 0,75                  | grün / green    | 91434                 | 36  |
| <b>GS = Gerade schneidend</b><br><b>GS = straight, cutting</b>  |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>GS 60</b><br>   | 0              | 3.5    | 0,45                  | grün / green    | 9178                  | 36  |
|   | 2-0            | 3      | 0,75                  | grün / green    | 9174                  | 36  |
|   | 0              | 3.5    | 0,75                  | grün / green    | 9179                  | 36  |
| <b>KS = 1/2-gebogene außen schneidend</b><br><b>KS = 1/2 curved, reverse cutting</b>  |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>KS 20</b><br>   | 3-0            | 2      | 0,45                  | grün / green    | 9181                  | 36  |
| <b>HSPM = 1/2-Kreis SPATULA</b><br><b>(PREMIUM-Schliff)</b><br><b>HSPM = 1/2 circle, spatulated (PREMIUM cut)</b>                           |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>2 x HSPM 8</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut   | 5-0            | 1      | 0,45                  | weiß / white    | 9192                  | 24  |
|   | 4-0            | 1.5    | 0,45                  | weiß / white    | 9191                  | 24  |
| <b>VSPM F = 1/4-Kreis SPATULA</b><br><b>(PREMIUM-Schliff)</b><br><b>VSPM F = 1/4 circle, spatulated (PREMIUM cut)</b>                       |                |        |                       |                 |                       |   |
| <b>2 x VSPM 8 F</b><br><br>PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut | 5-0            | 1      | 0,45                  | weiß / white    | 9212                  | 24  |

# SUPOLENE

Einzelfäden, steril, vorgeschnitten / Sterile pre-cut suture, non-needed



| Stärke / gauge<br>USP | gauge<br>metric | Länge / length<br>(m) | Farbe<br>colour | Best.-Nr.<br>code no. | Packungsinhalt<br>box content<br>(Stück / pieces) |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
|                       |                 |                       |                 |                       |   |
| 3-0                   | 2               | 5 x 0,35              | grün / green    | W453                  | 24  |
| 2-0                   | 3               | 5 x 0,35              | grün / green    | W553                  | 24  |
| 0                     | 3.5             | 5 x 0,35              | grün / green    | W653                  | 24  |
|                       |                 |                       |                 |                       |   |
| 4-0                   | 1.5             | 3 x 0,50              | grün / green    | W335                  | 24  |
| 3-0                   | 2               | 3 x 0,50              | grün / green    | W435                  | 24  |
| 2-0                   | 3               | 3 x 0,50              | grün / green    | W535                  | 24  |
| 0                     | 3.5             | 3 x 0,50              | grün / green    | W635                  | 24  |
| 1                     | 4               | 3 x 0,50              | grün / green    | W735                  | 24  |
| 2                     | 5               | 3 x 0,50              | grün / green    | W835                  | 24  |
|                       |                 |                       |                 |                       |   |
| 4-0                   | 1.5             | 5 x 0,50              | grün / green    | W355                  | 24  |
| 3-0                   | 2               | 5 x 0,50              | grün / green    | W455                  | 24  |
| 2-0                   | 3               | 5 x 0,50              | grün / green    | W555                  | 24  |
| 0                     | 3.5             | 5 x 0,50              | grün / green    | W655                  | 24  |
| 1                     | 4               | 5 x 0,50              | grün / green    | W755                  | 24  |
| 2                     | 5               | 5 x 0,50              | grün / green    | W855                  | 24  |
|                       |                 |                       |                 |                       |   |
| 4-0                   | 1.5             | 6 x 0,50              | grün / green    | SW355                 | 24  |
| 3-0                   | 2               | 6 x 0,50              | grün / green    | SW455                 | 24  |
| 2-0                   | 3               | 6 x 0,50              | grün / green    | SW555                 | 24  |
| 0                     | 3.5             | 6 x 0,50              | grün / green    | SW655                 | 24  |
| 1                     | 4               | 6 x 0,50              | grün / green    | SW755                 | 24  |
| 2                     | 5               | 6 x 0,50              | grün / green    | SW855                 | 24  |
|                       |                 |                       |                 |                       |   |
| 4-0                   | 1.5             | 10 x 0,50             | grün / green    | W3105                 | 24  |
| 3-0                   | 2               | 10 x 0,50             | grün / green    | W4105                 | 24  |
| 2-0                   | 3               | 10 x 0,50             | grün / green    | W5105                 | 24  |
|                       |                 |                       |                 |                       |   |
| 2-0                   | 3               | 12 x 0,50             | grün / green    | SW5105                | 24  |
| 0                     | 3.5             | 12 x 0,50             | grün / green    | SW6105                | 24  |
| 1                     | 4               | 12 x 0,50             | grün / green    | SW7105                | 24  |
|                       |                 |                       |                 |                       |   |
| 3-0                   | 2               | 17 x 0,50             | grün / green    | W4175                 | 24  |
|                       |                 |                       |                 |                       |   |



# SUPOLENE

Einzelfäden, steril, vorgeschritten / Sterile pre-cut suture, non-needled



| Stärke / gauge<br>USP      metric |     | Länge / length<br>(m) | Farbe<br>colour | Best.-Nr.<br>code no. | Packungsinhalt<br>box content<br>(Stück / pieces) |
|-----------------------------------|-----|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| 2-0                               | 3   | 2 x 0,75              | grün / green    | W520                  | 24  |
| 0                                 | 3.5 | 2 x 0,75              | grün / green    | W620                  | 24  |
| 1                                 | 4   | 2 x 0,75              | grün / green    | W720                  | 24  |
| 2                                 | 5   | 2 x 0,75              | grün / green    | W820                  | 24  |
| 3                                 | 6   | 2 x 0,75              | grün / green    | W920                  | 24  |
| 1                                 | 4   | 5 x 0,75              | grün / green    | W750                  | 24  |
| 2                                 | 5   | 5 x 0,75              | grün / green    | W850                  | 24  |
| 3                                 | 6   | 5 x 0,75              | grün / green    | W950                  | 24  |



**RESORBA Medical GmbH**

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

🖱 [resorba.com](https://resorba.com) | ✉ [infomail@resorba.com](mailto:infomail@resorba.com) | ☎ +49 9128 / 91 15 0



Advanced Medical Solutions