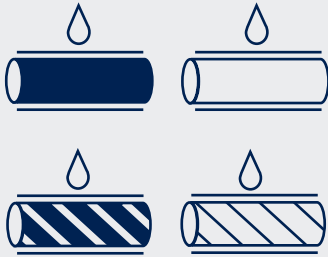


SUPRAMID

NICHT-RESORBIERBARES NAHTMATERIAL

RESORBA
SUTURES & SUPPLIES

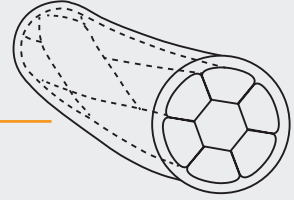


- ✓ nicht-resorbierbarer Polyamid-Faden
- ✓ sehr geschmeidig
- ✓ zugfest
- ✓ geringe Gewebereaktion
- ✓ gute Knoteneigenschaften

- ✓ *non-absorbable polyamide-suture*
- ✓ *very soft*
- ✓ *high tensile strength*
- ✓ *less tissue reaction*
- ✓ *good knotting properties*

SUPRAMID

NICHT-RESORBIERBARES NAHTMATERIAL



▶ SUPRAMID ist als monofiles, nicht-resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial aus einem Copolymerisat aus Polyamid 6 und Polyamid 6.6 erhältlich.

In stärkeren Durchmessern wird es als pseudomonofiles, nicht-resorbierbares, chirurgisches Nahtmaterial aus Polyamid 6.6, einem Polymer von Hexamethyldiamin und Adipinsäure, mit einer Beschichtung aus Polyamid 6, einem ϵ -Caprolactam-Polymer, angeboten.

Besonderheit

Trotz seiner synthetischen Herkunft, bedingt durch die peptidartige Struktur, unterliegt SUPRAMID nach längerem Verbleib im Gewebe der allmählichen Degradation und ist

daher mit wenigen Ausnahmen nur für Hautnähte oder Gewebe, die keine permanente Wundunterstützung benötigen, geeignet.

Das Material ist mit einem physiologisch unbedenklichen Farbstoff eingefärbt.

- ▶ **Farbe:** weiß (ohne Farbstoff) oder schwarz
- ▶ **Chemische Bezeichnung:**
monofil: Polyamid 6-6.6
pseudomonofil: Polyamid 6.6 und Polyamid 6
- ▶ **Fadenstärke:** USP 6-0 – 2
(0.7-5 metric)
- ▶ **Konfektionsangebote:**
 - Nadel-Faden-Kombinationen
 - in vorgeschrittenen Längen
- ▶ **Sterilisation:** Ethylenoxid

Eigenschaften

- ✓ überdurchschnittlich weich und geschmeidig
- ✓ sehr gute Handhabungs- und Knüpfeigenschaften
- ✓ keine Kapillarität
- ✓ hervorragendes Gewebedurchzugsverhalten

▶ SUPRAMID is available as a monofilament, non-absorbable, surgical suture made from a copolymer of polyamide 6 and polyamide 6.6. In larger diameters, it is supplied as a pseudo-monofilament, non-absorbable, surgical suture made from polyamide 6.6, a polymer of hexamethylenediamine and adipic acid with a polyamide-6 coating, a polymer of ϵ -caprolactam.

Special feature

Despite its synthetic origin and peptide-like structure, SUPRAMID gradually degrades after being in tissue for an extended period. Therefore, it is primarily suitable for

skin sutures or tissues that do not require permanent wound support, with few exceptions. The material is coloured with a physiologically harmless dye.

- ▶ **Colour:** white (no dye) or black
- ▶ **Chemical name:**
monofilament: polyamide 6-6.6
pseudomonofilament:
polyamide 6.6 and polyamide 6
- ▶ **Thread diameter:** USP 6-0 – 2
(0.7-5 metric)
- ▶ **Types of packaging:**
 - needle-thread-combinations
 - in precut lengths
- ▶ **Sterilization method:**
ethylene oxide

Properties

- ✓ above average softness and suppleness
- ✓ superior handling and knotting properties
- ✓ no capillarity
- ✓ excellent tissue passage

SUPRAMID

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile









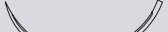

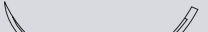



Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)	
	USP	metric					
HRT = 1/2-Kreis schneidende Rundkörper							
HRT = 1/2 circle, taper cutting							
HRT 18 ▼		4-0	1.5	0,50	schwarz / black	6061	36
		3-0	2	0,50	schwarz / black	6062	36
		4-0	1.5	0,75	schwarz / black	6063	36
		3-0	2	0,75	schwarz / black	6064	36
DRT = 3/8-Kreis schneidende Rundkörper							
DRT = 3/8 circle, taper cutting							
DRT 18 ▼ Schlinge / loop Tsuge-Naht / Tsuge Suture		4-0	1.5	0,50	weiß / white	6080	36
HS = 1/2-Kreis außen schneidend							
HS = 1/2 circle, reverse cutting							
HS 15 ▼		4-0	1.5	0,45	schwarz / black	6118	36
		3-0	2	0,45	schwarz / black	6119	36
		4-0	1.5	0,75	schwarz / black	61112	36
HS 18 ▼		5-0	1	0,45	schwarz / black	6111	36
		4-0	1.5	0,45	schwarz / black	6112	36
		3-0	2	0,45	schwarz / black	6114	36
		4-0	1.5	0,75	schwarz / black	61111	36
		3-0	2	0,75	schwarz / black	6117	36
		4-0	1.5	0,75	schwarz / black	61113	36
HS 20 ▼		4-0	1.5	0,75	schwarz / black	61110	36
		3-0	2	0,75	schwarz / black	6116	36
		3-0	2	0,45	schwarz / black	6113	36
HS 22 ▼		3-0	2	0,75	schwarz / black	61114	36
		2-0	3	0,75	schwarz / black	6115	36

SUPRAMID

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile











Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
DS = 3/8-Kreis außen schneidend DSM = mit PREMIUM-Schliff DS = 3/8 circle, reverse cutting DSM = PREMIUM cut						
DSM 11  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	6-0	0,7	0,45	schwarz / black	6151	36
	5-0	1	0,45	schwarz / black	6152	36
DS 13 	5-0	1	0,45	schwarz / black	6141	36
	5-0	1	0,75	schwarz / black	61410	36
DSM 13  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	schwarz / black	6158	36
	4-0	1,5	0,45	schwarz / black	6154	36
DS 16 	4-0	1,5	0,45	schwarz / black	61432	36
DSM 16  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	schwarz / black	6157	36
	4-0	1,5	0,75	schwarz / black	6153	36
DS 18 	4-0	1,5	0,45	schwarz / black	6142	36
	3-0	2	0,45	schwarz / black	6143	36
	4-0	1,5	0,75	schwarz / black	61428	36
	3-0	2	0,75	schwarz / black	61429	36
	3-0	2	6 x 0,45	schwarz / black	M6144 (M)	12
	4-0	1,5	0,45	weiß / white	61430	36
	3-0	2	0,45	weiß / white	61431	36
DS 18 F 	4-0	1,5	0,45	schwarz / black	61420	36
DSM 18  ▼ PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	4-0	1,5	0,75	schwarz / black	6155	36
	3-0	2	0,75	schwarz / black	6156	36
DS 24 	4-0	1,5	0,45	schwarz / black	6146	36
	3-0	2	0,45	schwarz / black	6147	36
	2-0	3	0,45	schwarz / black	61422	36
	3-0	2	0,75	schwarz / black	61425	36
	3-0	2	6 x 0,45	schwarz / black	M6148 (M)	12
DS 24 F 	5-0	1	0,45	schwarz / black	61418*	36
DS 30 	2-0	3	0,45	schwarz / black	6149	36
	0	3,5	0,45	schwarz / black	61423	36
	2-0	3	0,75	schwarz / black	61426	36
	0	3,5	0,75	schwarz / black	61427	36
DS 40 	3-0	2	0,45	schwarz / black	61412	36
	2-0	2,5	0,45	schwarz / black	61413	36
	0	3,5	0,75	weiß / white	61421	36

SUPRAMID

Sterile Nadel-Faden-Kombination / needle suture combination, sterile



Nadel / needle	Stärke / gauge		Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
	USP	metric				
GR = Gerade Rundkörper GR= straight, taper point						
GR 20 	5-0	1	0,45	schwarz / black	6091	36
	4-0	1.5	0,45	schwarz / black	6090	36
	4-0	1.5	0,75	schwarz / black	6092	36
VSPM, VSPM F = 1/4-Kreis SPATULA PREMIUM-Schliff VSPM, VSPM F = 1/4 circle, spatulated, PREMIUM cut						
VSPM 8   PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	4-0	1.5	0,75	weiß / white	6211	24
2x VSPM 8   PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	4-0	1.5	0,25	weiß / white	6213	24
	4-0	1.5	0,45	weiß / white	6214	24
2 x VSPM 8 F   PREMIUM-Schliff / PREMIUM cut	5-0	1	0,45	weiß / white	6212	24

SUPRAMID

Einzelfäden, steril, vorgeschritten / Sterile pre-cut suture, non-needed



Stärke / gauge USP	gauge metric	Länge / length (m)	Farbe colour	Best.-Nr. code no.	Packungsinhalt box content (Stück / pieces)
4-0	1.5	3 x 0,50	schwarz / black	SAM335	24
3-0	2	3 x 0,50	schwarz / black	SAM435	24
2-0	3	3 x 0,50	schwarz / black	SAM535	24
1	4	3 x 0,50	schwarz / black	SAM735	24
4-0	1.5	3 x 0,50	weiß / white	M335	24
3-0	2	3 x 0,50	weiß / white	M435	24
2-0	3	3 x 0,50	weiß / white	M535	24
0	3.5	3 x 0,50	weiß / white	M635	24
1	4	3 x 0,50	weiß / white	M735	24
4-0	1.5	5 x 0,50	schwarz / black	SAM355	24
3-0	2	5 x 0,50	schwarz / black	SAM455	24
2-0	3	5 x 0,50	schwarz / black	SAM555	24
0	3.5	5 x 0,50	schwarz / black	SAM655	24
3-0	2	5 x 0,50	weiß / white	M455	24
2-0	3	5 x 0,50	weiß / white	M555	24
0	3.5	5 x 0,50	weiß / white	M655	24
3-0	2	10 x 0,50	schwarz / black	SAM4105	24
2-0	3	10 x 0,50	weiß / white	M5105	24



RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

resorba.com | infomail@resorba.com | [+49 9128 / 91 15 0](tel:+49912891150)



Advanced Medical Solutions