



Mit
verschiedenen
Einweg-
Ladeeinheiten
verwendbar



easyEndo™ Universal Lineares Klammernahtgerät

- ✓ Einhand-Anwendung
- ✓ PCT-Technologie
- ✓ 60°-Artikulation

Lineares Klammernahtgerät: Verlässliche Performance für ein breiteres Anwendungsspektrum

Je nach Indikation, Anwendungsgebiet oder Gewebestärke mit folgenden Nachladeeinheiten verwendbar: easyEndo™ PRO, easyEndo™ FLEX und easyEndo™ FLEX curved tip.




Curved Tip

Volle Kontrolle durch die gebogene Spitze mit verbesserter Zugangsmöglichkeit für Eingriffe, bei denen beengte chirurgische Stellen mehr Kontrolle und Handhabbarkeit erfordern

60°-Artikulation in beide Richtungen


Einzigtartiges Gelenkdesign für mehr Flexibilität, Präzision und Kontrolle

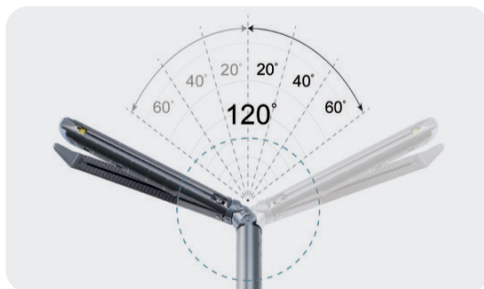

Einzigtartiges 120°-Gelenk


Bietet die Möglichkeit, das Gelenk so einzustellen und es dort zu positionieren, wo Sie es wünschen.

Mehr Flexibilität für eine vollständige „Ein-Magazin-Resektion“ – speziell bei Kolon- und Rektumoperationen.

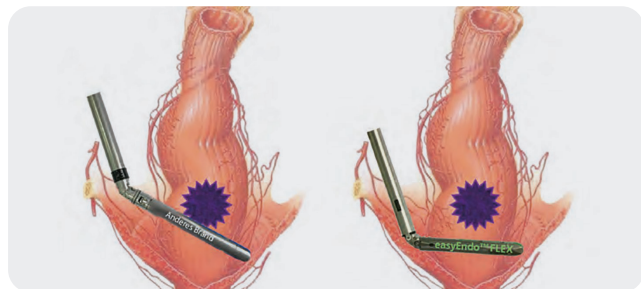

Vorteile bei tiefer Rektumresektion

- Präzise Kontrolle beim Absetzen des zu resezierenden Gewebes während der OP
- Ermöglicht tiefer liegende Resektionslinien
- Bessere chirurgische Ergebnisse
- Reduzierter Bedarf an Nachladeeinheiten – damit wird das Risiko einer Klammernahtinsuffizienz reduziert

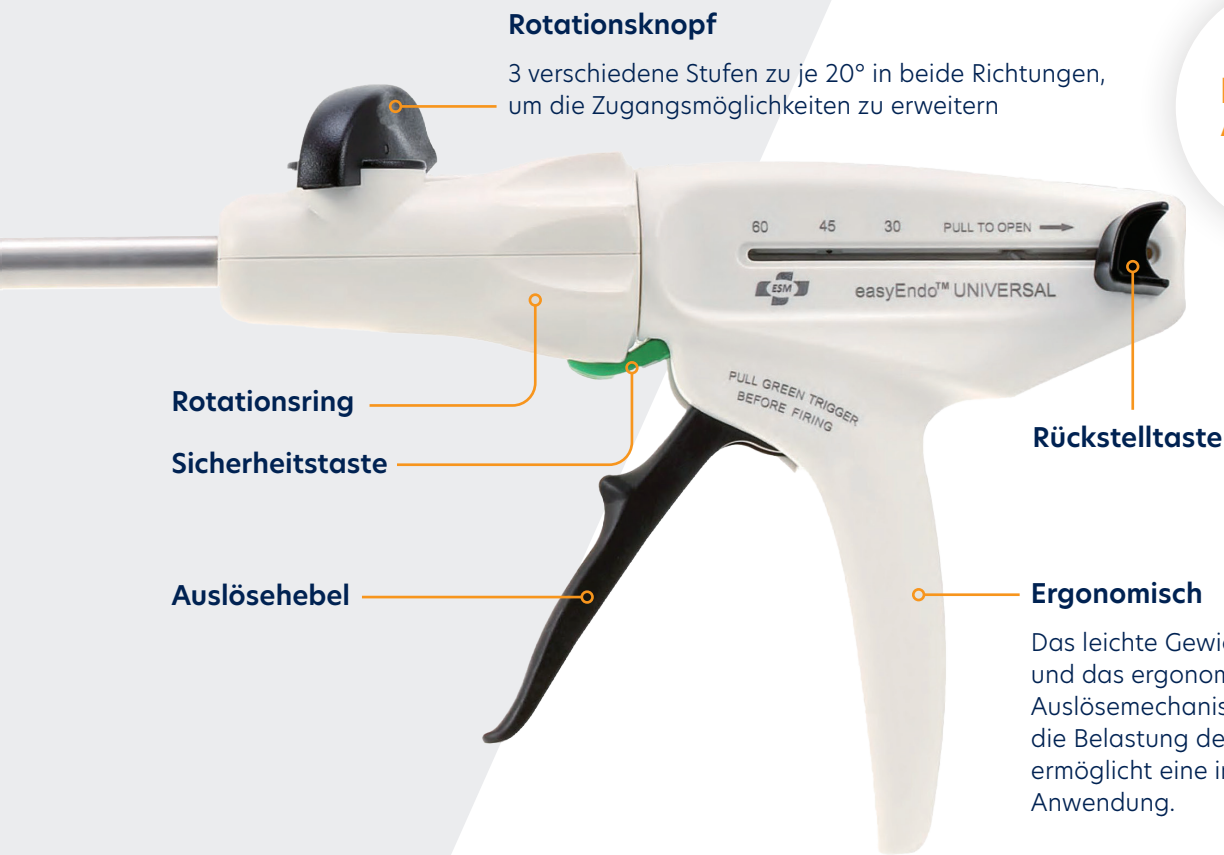

Rotationsknopf

3 verschiedene Stufen zu je 20° in beide Richtungen, um die Zugangsmöglichkeiten zu erweitern

Ein-Hand-Anwendung

Rotationsring

Sicherheitstaste

Auslösehebel


Rückstelltaste

Ergonomisch

Das leichte Gewicht des Staplers und das ergonomische Design des Auslösemechanismus reduziert die Belastung des Chirurgen und ermöglicht eine intuitive Ein-Hand-Anwendung.


PCT-Technologie

Perfekte B-Form durch "Precise Staple Pocket Formation"-Technologie

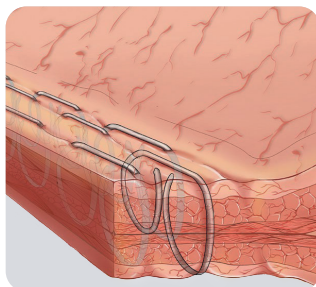


Perfekte B-Form

Dadurch wird die beste Naht- und Hämostase-wirkung erzielt.

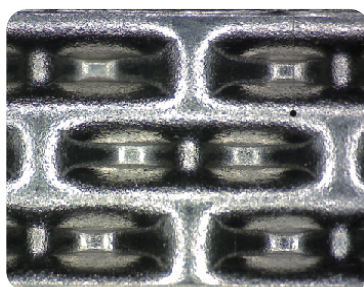

PCT-Technologie

100% stabile Führung, um eine exakte B-Form der Klammern sicherzustellen.

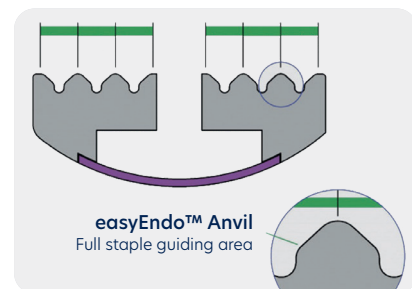

easyEndo™ Anpressplatte

Die Gewebekontaktfläche führt die Klammern vollständig in die Klammertaschen der Anpressplatte – für eine perfekte Klammerverformung und Hämostase.

easyEndo™ Universal

easyEndo™ Universal Einweg-Handgriffe

Art. Nr.	Schaftlänge	Durchmesser	VE	Produktbeispiele
U12S	70 mm	12 mm	1 Stück	
U12M	160 mm	12 mm	1 Stück	
U12L	250 mm	12 mm	1 Stück	

easyEndo™ FLEX Ladeeinheiten (abwinkelbar)

Art. Nr.	Farbe	Klammerhöhe: offen	geschlossen	Größe	VE	Produktbeispiele
R30W	weiß	2,5 mm	1 mm	30 mm	6 Stück	
R45W	weiß	2,5 mm	1 mm	45 mm	6 Stück	
R60W	weiß	2,5 mm	1 mm	60 mm	6 Stück	
R30B	blau	3,5 mm	1,5 mm	30 mm	6 Stück	
R45B	blau	3,5 mm	1,5 mm	45 mm	6 Stück	
R60B	blau	3,5 mm	1,5 mm	60 mm	6 Stück	
R45C	gold	3,8 mm	1,7 mm	45 mm	6 Stück	
R60C	gold	3,8 mm	1,7 mm	60 mm	6 Stück	
R45G	grün	4,1 mm	2 mm	45 mm	6 Stück	
R60G	grün	4,1 mm	2 mm	60 mm	6 Stück	
R45T	schwarz	4,8 mm	2,3 mm	45 mm	6 Stück	
R60T	schwarz	4,8 mm	2,3 mm	60 mm	6 Stück	

easyEndo™ FLEX „curved tip“ Ladeeinheiten (abwinkelbar)

Art. Nr.	Farbe	Klammerhöhe:		Größe	VE	Produktbeispiele
		offen	geschlossen			
R30MG	grau	2 mm	0,75 mm	30 mm	6 Stück	
R45MG	grau	2 mm	0,75 mm	45 mm	6 Stück	
R60MG	grau	2 mm	0,75 mm	60 mm	6 Stück	
R30WG	weiß	2,5 mm	1 mm	30 mm	6 Stück	
R45WG	weiß	2,5 mm	1 mm	45 mm	6 Stück	
R60WG	weiß	2,5 mm	1 mm	60 mm	6 Stück	

easyEndo™ PRO Ladeeinheiten (nicht abwinkelbar)

Art. Nr.	Farbe	Klammerhöhe:		Größe	VE	Produktbeispiele
		offen	geschlossen			
L30W	weiß	2,5 mm	1 mm	30 mm	6 Stück	
L45W	weiß	2,5 mm	1 mm	45 mm	6 Stück	
L60W	weiß	2,5 mm	1 mm	60 mm	6 Stück	
L30B	blau	3,5 mm	1,5 mm	30 mm	6 Stück	
L45B	blau	3,5 mm	1,5 mm	45 mm	6 Stück	
L60B	blau	3,5 mm	1,5 mm	60 mm	6 Stück	
L45C	gold	3,8 mm	1,7 mm	45 mm	6 Stück	
L60C	gold	3,8 mm	1,7 mm	60 mm	6 Stück	
L45G	grün	4,1 mm	2 mm	45 mm	6 Stück	
L60G	grün	4,1 mm	2 mm	60 mm	6 Stück	



RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

🖱 resorba.com | ✉ infomail@resorba.com | ☎ +49 9128 / 91 15 0



Advanced Medical Solutions