

easyEndo™ Lite

resorba.com



easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät

- ✓ Einhand-Anwendung
- ✓ PCT-Technologie
- ✓ 60°-Artikulation
- ✓ Ergonomisches Design

Mit
austauschbaren
Einweg-
Klammernaht-
magazinen

Größere Flexibilität durch 60°-Artikulation in beide Richtungen und zusätzlich verkürzte Klemmbackenlänge

Universell

Je nach Indikation, Gewebestärke oder Anwendungsgebiet mit den gängigen Klammernahtmagazinen (grau, weiß, blau, gold, grün und schwarz) verwendbar

**Erhöhte
Kompressions-
kraft von
65 Nm**



Artikulation

Doppelartikulationsgelenk für eine sichere 60°-Artikulation in beide Richtungen (in 4 Schritten je 15° einstellbar)


Branchen-Anpressplatte

Schlankes, ergonomisches Design für einen optimalen Zugang in schwer erreichbare und sensible anatomische Regionen

60°-Artikulation in beide Richtungen

Einzigartiges Gelenkdesign für mehr Flexibilität, Präzision und Kontrolle

**Höchste
Flexibilität**

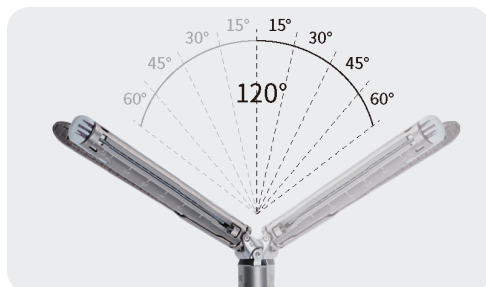


Einzigartiges 120°-Gelenk

Positionieren Sie das Artikulationsgelenk und stellen Sie es in der gewünschten Position ein.




Präzision und Kontrolle

Die verkürzte Klemmbackenlänge gewährleistet mehr Präzision und Kontrolle.

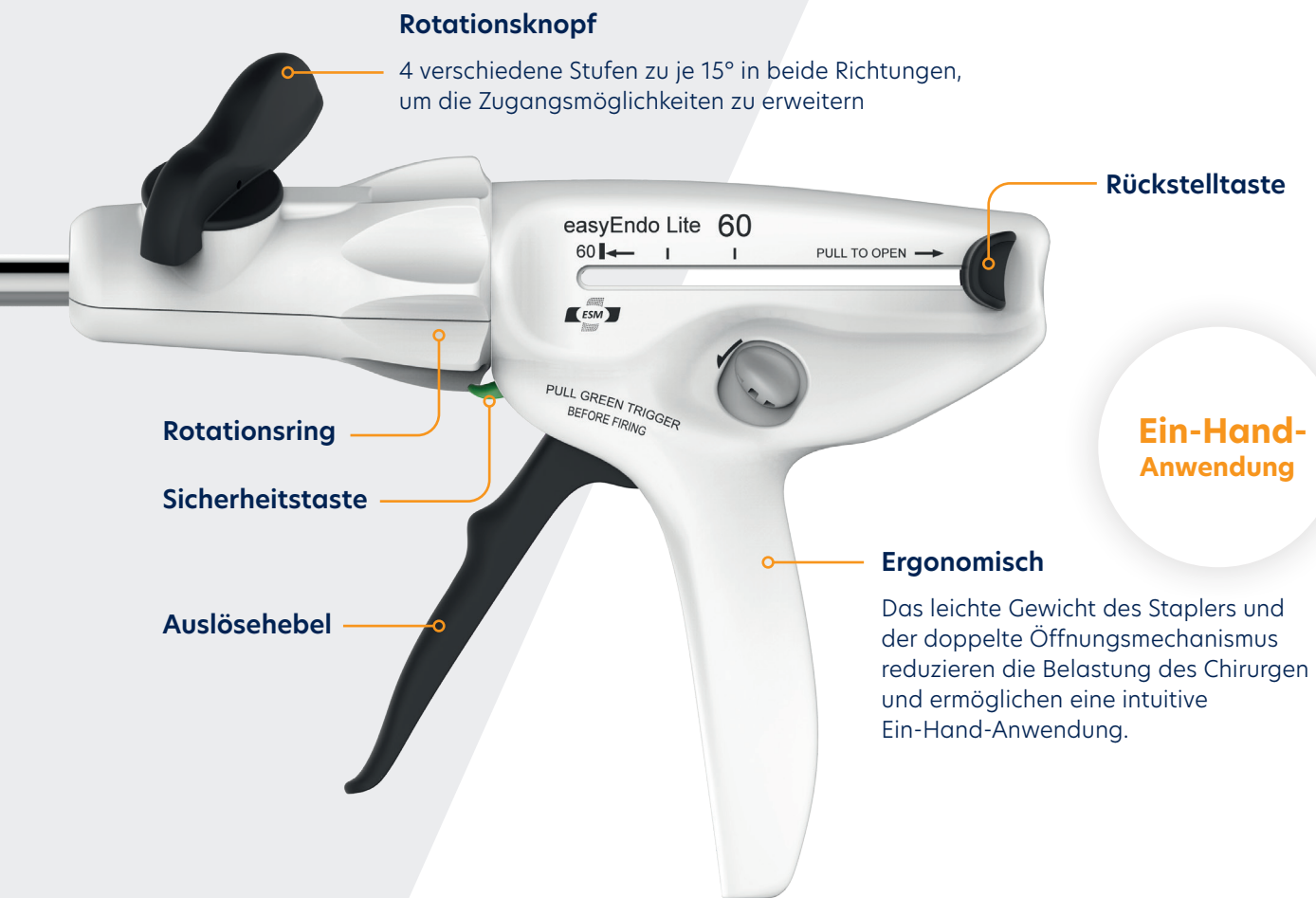


PCT-Technologie

Perfekte B-Form durch "Precise Staple Pocket Formation"-Technologie

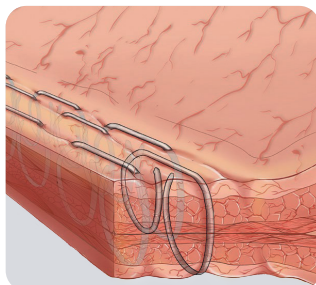

Perfekte B-Form

Dadurch wird die beste Klammernahtformation und Hämostasewirkung erzielt.

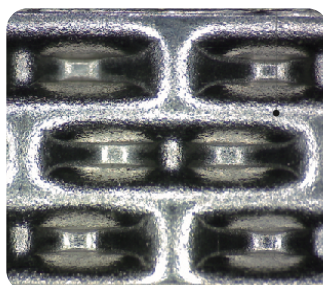


PCT-Technologie

100% stabile Führung, um eine exakte B-Form der Klammern sicherzustellen.

Messer Klinge

Beste Qualität und Härte

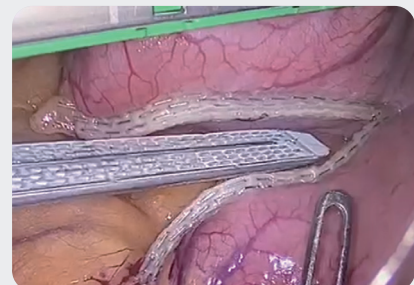


Schnittkantenoptimierung

Problemloses erneutes Auslösen der unterschiedlichen Klammernmagazine durch beste Stahlqualität und Härte der Messer Klinge (500 HV).

easyEndo™ Lite Stapler

Art. Nr.	Schaftlänge	Größe	VE	Produktbeispiele
U12S45	260 mm	12 mm	1 Stück	
U12M45	350 mm	12 mm	1 Stück	
U12L45	440 mm	12 mm	1 Stück	
U12S60	260 mm	12 mm	1 Stück	
U12M60	350 mm	12 mm	1 Stück	
U12L60	440 mm	12 mm	1 Stück	
Stapler mit abnehmbarer gebogener Spitze (Curved Tip):				
U12S45G	260 mm	12 mm	1 Stück	
U12M45G	350 mm	12 mm	1 Stück	
U12L45G	440 mm	12 mm	1 Stück	
U12S60G	260 mm	12 mm	1 Stück	
U12M60G	350 mm	12 mm	1 Stück	
U12L60G	440 mm	12 mm	1 Stück	

easyEndo™ Lite Klammernahtmagazine

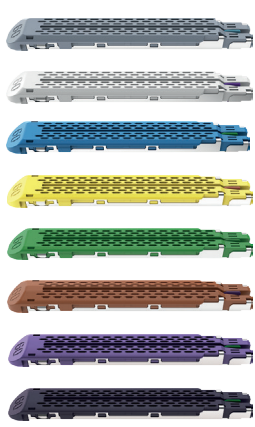Art. Nr.	Farbe	Klammerhöhe: offen	geschlossen	Größe	VE	Produktbeispiele
Magazine mit dreireihiger Klammernaht:						
N45M	Grau	2,0 mm	0,75 mm	45 mm	6 Stück	
N45W	Weiß	2,5 mm	1,0 mm	45 mm	6 Stück	
N45B	Blau	3,5 mm	1,5 mm	45 mm	6 Stück	
N45C	Gold	3,8 mm	1,7 mm	45 mm	6 Stück	
N45G	Grün	4,1 mm	2,0 mm	45 mm	6 Stück	
N60M	Grau	2,0 mm	0,75 mm	60 mm	6 Stück	
N60W	Weiß	2,5 mm	1,0 mm	60 mm	6 Stück	
N60B	Blau	3,5 mm	1,5 mm	60 mm	6 Stück	
N60C	Gold	3,8 mm	1,7 mm	60 mm	6 Stück	
N60G	Grün	4,1 mm	2,0 mm	60 mm	6 Stück	
Magazine mit seitlicher Wölbung (ArcGrip):						
N45BC	Blau	3,5 mm	1,5 mm	45 mm	6 Stück	
N45CC	Gold	3,8 mm	1,7 mm	45 mm	6 Stück	
N45GC	Grün	4,1 mm	2,0 mm	45 mm	6 Stück	
N60BC	Blau	3,5 mm	1,5 mm	60 mm	6 Stück	
N60CC	Gold	3,8 mm	1,7 mm	60 mm	6 Stück	
N60GC	Grün	4,1 mm	2,0 mm	60 mm	6 Stück	
Magazine mit unterschiedlicher Klammernahthöhe (3 Reihen; TS-Technologie):						
N45VM	Braun	3,5-2,5-2,0 mm	1,5-0,88 mm	45 mm	6 Stück	
N45MT	Lila	4,1-3,8-3,5 mm	2,25-1,5 mm	45 mm	6 Stück	
N45XT	Schwarz	4,4-4,1-3,8 mm	3,0-2,25 mm	45 mm	6 Stück	
N60VM	Braun	3,5-2,5-2,0 mm	1,5-0,88 mm	60 mm	6 Stück	
N60MT	Lila	4,1-3,8-3,5 mm	2,25-1,5 mm	60 mm	6 Stück	
N60XT	Schwarz	4,4-4,1-3,8 mm	3,0-2,25 mm	60 mm	6 Stück	



easyEndo™ Lite Sets

Art. Nr.	Produktbeschreibung	Ausführung Handgriff / Magazin: Farbe / Länge	VE
ASBS45L	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set	S / Blau / 45 mm	6x U12S45 6x N45B
ASBS60L	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set	S / Blau / 60 mm	6x U12S60 6x N60B
ASBM60L	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set	M / Blau / 60 mm	6x U12M60 6x N60B
ASGS45L	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set	S / Grün / 45 mm	6x U12S45 6x N45G
ASGM45L	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set	M / Grün / 45mm	6x U12M45 6x N45G
ASGS60L	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set	S / Grün / 60mm	6x U12S60 6x N60G
ASGM60L	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set	M / Grün / 60mm	6x U12M60 6x N60G
Appendektomie-Set:			
ASBM45L	easyEndo™ Lite Appendektomie Lineares Klammernahtgerät-Set	M / Blau / 45 mm	6x U12M45 6x N45B
Sets mit abnehmbarer gebogener Spitze (Curved Tip):			
ASBS45LG	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set (Curved Tip)	S / Blau / 45 mm	6x U12S45G 6x N45B
ASBM45LG	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set (Curved Tip)	M / Blau / 45 mm	6x U12M45G 6x N45B
ASBS60LG	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set (Curved Tip)	S / Blau / 60 mm	6x U12S60G 6x N60B
ASBM60LG	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set (Curved Tip)	M / Blau / 60 mm	6x U12M60G 6x N60B
ASGS45LG	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set (Curved Tip)	S / Grün / 45 mm	6x U12S45G 6x N45G
ASGM45LG	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set, (Curved Tip)	M / Grün / 45 mm	6x U12M45G 6x N45G
ASGS60LG	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set (Curved Tip)	S / Grün / 60 mm	6x U12S60G 6x N60G
ASGM60LG	easyEndo™ Lite Lineares Klammernahtgerät-Set (Curved Tip)	M / Grün / 60 mm	6x U12M60G 6x N60G





RESORBA Medical GmbH

Am Flachmoor 16, 90475 Nürnberg, Germany

🖱 resorba.com | ✉ infomail@resorba.com | ☎ +49 9128 / 91 15 0



Advanced Medical Solutions